

Angelcare®

AC401

Rechargeable Movement & Sound Monitor P.2

Moniteur de mouvements et de son rechargeable . . . P.10

Monitor de Movimiento y Sonido Recargable P.18

*Wiederaufladbarer Geräusch- und
Bewegungsmelder P.26*

Monitor de movimento e som recarregável P.34

Opladbare Geluids- en Bewegingsmonitor P.42

Oppladbar babycall for bevegelser og lyd P.50

Uppladdningsbart Ljud- och Rörelselarm P.58

Oppladelig bevægelse/lyd babyalarm P.66

Uudelleen ladattava liike- ja äänimonitori P.74

Monitor Ruchu i Dźwięku z akumulatorkiem P.82

Légzésfigyelő és babaőrző monitor P.90

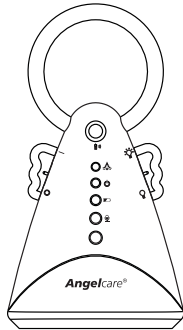


TABLA DE CONTENIDOS


Componentes y Opciones Especiales de su monitor Angelcare®	18
Como utilizar su monitor Angelcare®	19
Prueba su monitor Angelcare®	22
Advertencias	23
Mantenimiento de su monitor Angelcare®	23
Solución de problemas	24
Garantía	25
Distribuidores	99

COMPONENTES DE SU MONITOR ANGELCARE®

Unidad de Vigilancia
(emisor)




Unidad de Control Paternal
Recargable (Receptor) y
Cargador

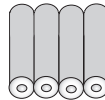

4 pilas AAA recargables
para la Unidad de Control
Paternal

TAMBIÉN NECESITARÁ:

4 pilas no recargables (no incluidas) para la unidad de vigilancia, en caso de que fallo en la alimentación eléctrica

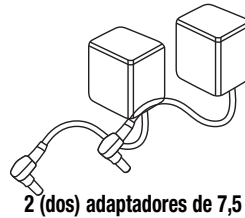


2 (dos) adaptadores de 7,5 V




Sensor(es) de movimiento
(1 ó 2)

CARACTERÍSTICAS

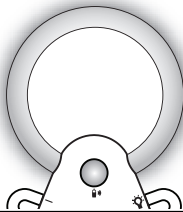


Una luz centinela
nocturna

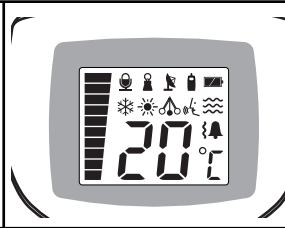

Elección de activación por voz
o recepción de sonido
continuo




Enganche para cinturón

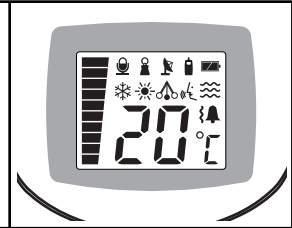

Indicación de temperatura
de la habitación en la
unidad receptora.

ALARMA Y ADVERTENCIAS

Si no se detecta ningún movimiento, su monitor Angelcare® le advertirá por alarma, vibración y efectos visuales. La unidad receptora portátil le tendrá informado en cada momento.

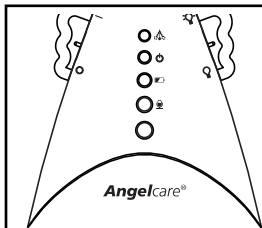


La alarma se dispara en la
unidad receptora y la luz verde
parpadeante se apaga.



Se activa una alarma en la
unidad receptora de los
padres.



Unidad de los padres con
aviso por vibración (no
disponible en todos los
países).


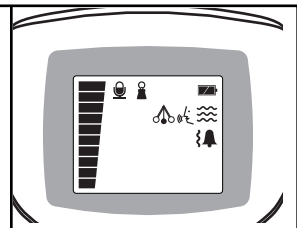


La pantalla de la unidad
receptora de los padres se
ilumina y aparece el icono de
vigilancia.

COMO UTILIZAR SU MONITOR ANGELCARE®

Paso 1


INSTALACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO BAJO EL COLCHÓN

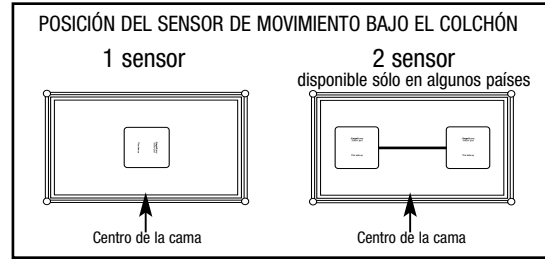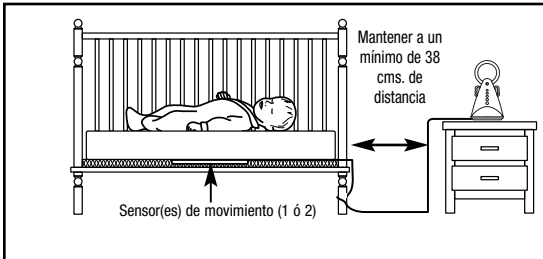

- Posicionar el sensor de movimiento como se indica arriba. La cara impresa debe quedar hacia arriba. No poner ropa de cama entre el colchón y los detectores de movimiento.
- Asegurar el cable del sensor al pie de la cama utilizando una atadura. Una vez en el suelo, colocar el cable de manera que quede fuera del alcance del bebé.
- El sensor debe permanecer sobre una superficie totalmente lisa y rígida. Ponga una plancha de madera de 6 mm (1/4") de espesor y una dimensión mínima de 28 cm (11") x 28 cm (11") x 6 mm (2") entre la base de la cuna y un sensor. La madera empujará el sensor hacia el colchón y mantendrá el contacto entre el sensor y el colchón, en caso el bebé se mueva. Asegúrese de que el cordón del sensor pase por debajo del colchón tal y como se muestra.
- El sensor funciona en todos los tamaños de camas para bebé y con todos los colchones excepto en los colchones de espuma de memoria. Sin embargo, siempre recomendamos probar el rendimiento del sensor para asegurarse de que todo el colchón esté cubierto. Deberá probar su sensor en el PASO 13.

Paso 2


INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA

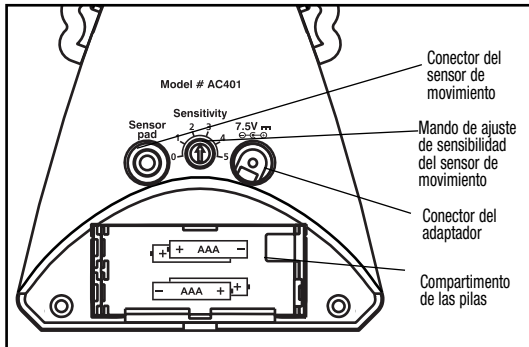

- Conectar el cable largo del sensor a la unidad de vigilancia.
- Insertar 4 pilas AAA (no incluidas) en la unidad de vigilancia (para soporte energético en caso de fallo de alimentación eléctrica).
- Conectar el adaptador AC a la unidad de vigilancia y enchufar el adaptador a una toma eléctrica en la habitación del bebé.
- Cuando ambas unidades estén adecuadamente instaladas, se podrá ajustar la sensibilidad del sensor de movimiento (si procede). El dial de sensibilidad muestra el nivel 1 al 5, donde 1 es menos sensible y 5 muy sensible. Está graduado en el nivel 2,5 y 3. En caso haya una falsa alarma, aumente la sensibilidad en medio nivel durante la prueba hasta que funcione perfectamente para el tamaño de su cama y colchón.

Paso 3


INSTALACIÓN DE LA UNIDAD RECEPTORA DE LOS PADRES

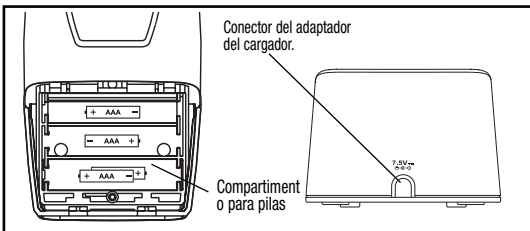

- Insertar 4 pilas AAA recargables (incluidas) en la unidad receptora de los padres. NUNCA usar pilas alcalinas normales.
- Conectar el adaptador AC al cargador de la unidad receptora de los padres y enchufarlo a una toma eléctrica. Cargar durante 15 horas seguidas antes de utilizar el monitor por primera vez.

Paso 4

CONEXIÓN DE LA UNIDAD RECEPTORA DE LOS PADRES A LA UNIDAD EMISORA DE VIGILANCIA

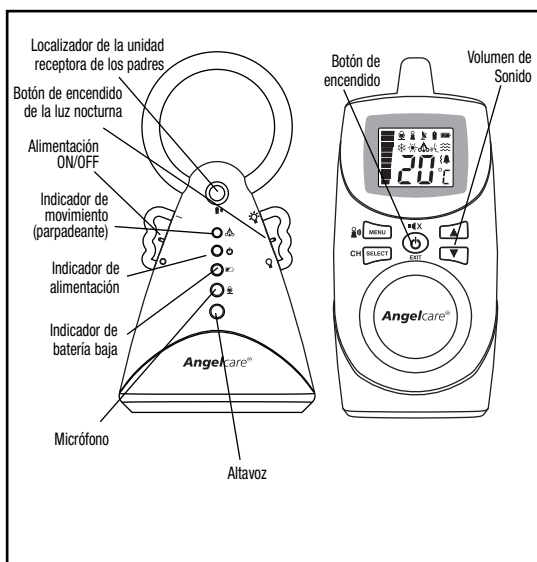

- Una vez la unidad receptora de los padres está completamente cargada (después de 15 horas), poner en posición ON ambos aparatos. Si la unidad receptora está ON y la emisora está OFF, la unidad de los padres emitirá una señal sonora pasado un minuto. Tras 4 segundos, la unidad se apagará sola.

Nota: Las unidades normalmente se reconocen y encuentran en forma automática; de no ser así, siga el procedimiento de conexión en el PASO 12.

- **Las diferentes opciones disponibles son programables pero el monitor puede empezar a utilizarse inmediatamente, con las siguientes opciones predeterminadas:**

- Sonido, movimiento y tics activados.
- Notificación de fuera de cobertura.
- Activación por voz activada (Esta función está activada (ON) en Suiza, Alemania y Austria)
- Indicador de temperatura activado, Control de temperatura de la habitación desactivado.
- Alarma de la unidad receptora de los padres activada, vibración desactivada.
- Volumen de altavoz al 3.
- Sensibilidad de sonido al 2.


- Para evitar acoplamiento (sonido silbante), mantener las dos unidades a un mínimo de 3 metros de distancia.

- Se puede ajustar el volumen de la unidad receptora de los padres con los botones con símbolos "flecha".

- Para encender la luz nocturna, subir el interruptor de la derecha.

Paso 5

PANTALLA Y BOTONES

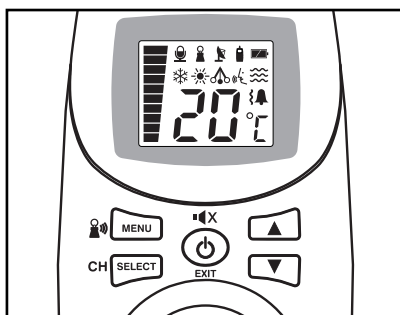


- Todas las funciones programables de su Angelcare® están disponibles a través del botón MENU.

Nota: Pulse el botón MENU brevemente para acceder al MENU. Si pulsa el botón MENU por mucho tiempo entrará al modo CONEXIÓN y el indicador "fuera de cobertura" comenzará a parpadear. Si esto sucede, presione MENU para comenzar nuevamente.

- Cuando la opción deseada aparezca en el monitor, pulse SELECT.
- Las diferentes alternativas de cada opción están disponibles a través de los botones de flecha ARIIBA y ABAJO.
- **EN CUALQUIER MOMENTO durante la programación de las funciones, puede salir del menú de selección pulsando EXIT. Si desea añadir programación adicional, espera 20 segundos y pulse MENU para ver la siguiente opción.**

Paso 6

TICS, SONIDOS Y MOVIMIENTOS

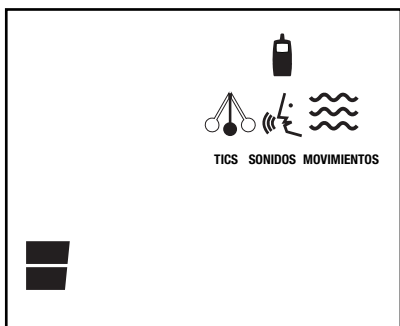


Su monitor Angelcare® permite elegir lo que quiera monitorizar.

- La función "Tic" es un sonido que indica que el sensor está detectando movimientos.
- La función "Sound" (sonido) se activa por la voz del bebé o bien por transmisión continua.
- La función "Movement" (movimiento) se activa cuando el sensor detecta movimiento. Detecta todos los movimientos del bebé y avisa cuando no hay movimientos. En ese último caso, una señal sonora continua suena durante 20 segundos. Si recibe falsas alarmas, ajuste la sensibilidad del sensor de movimiento.

- Pulse MENU, parpadearán los 3 iconos.
- Utilizando las flechas, seleccione cada icono y decida si lo quiere ON o no.
- Cuando haya hecho su elección, pulse SELECT y le llevará al siguiente icono.
- Pulse MENU para ver la siguiente opción, o EXIT para salir del menú de programación

Paso 7 INDICADOR DE FUERA DE ALCANCE

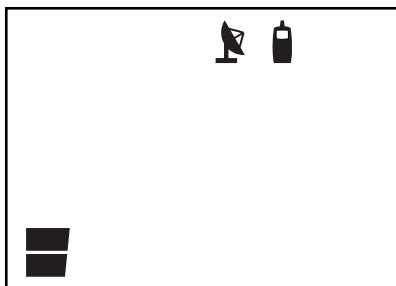


Su monitor está equipado con una función adicional "Fuera de Alcance", que le avisará cuando las dos unidades no se estén comunicando entre sí. Estas situaciones pueden ser debidas a la distancia o a interferencias físicas. Cobertura: hasta 250 mts. a campo abierto y entre 80 a 100 mts en interior.

Cuando las unidades estén sin cobertura, oírán un DOBLE BIP cada 8 segundos y el icono de "Fuera de alcance" se encenderá en la pantalla de la unidad receptora de los padres.

- Pulse MENU, el icono "Fuera de alcance" y la palabra ON aparecerán en la pantalla.
- Ponga esta opción en ON u OFF pulsando las flechas.
- Pulse SELECT.
- Pulse MENU para ver la siguiente opción o EXIT si quiere salir del menú de programación.


Paso 8 SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO

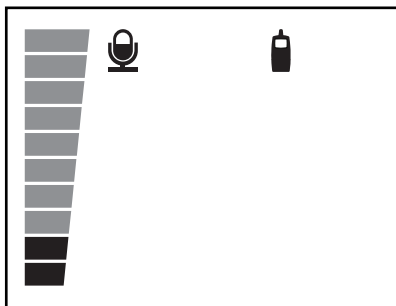

El sonido del monitor puede ser activado por voz o continuo. Si elige el modo de transmisión continua, oírás cualquier pequeño sonido que emita su bebé. Si usa activación por voz, oírás los sonidos dependiendo del nivel de sensibilidad que haya elegido.

- Pulse MENU, el icono MICROFONO y la palabra ON aparecerá en la pantalla.
- Déjelo en ON si desea mantener la activación por voz o en OFF si desea el modo continuo. Utilice las flechas para seleccionar ON/OFF.
- Pulse SELECT.
- Si desea utilizar la función de activación por voz, pulse de nuevo la tecla MENU para elegir el nivel de sensibilidad (4 niveles) del micrófono, utilizando las flechas.
- Pulse SELECT cuando el nivel deseado aparezca en pantalla.
- Pulse MENU para ver la siguiente opción o EXIT si quiere salir del menú de programación.

Paso 9 ALARMAS Y VIBRACIÓN (VIBRACIÓN NO DISPONIBLE EN TODOS LOS PAÍSES)

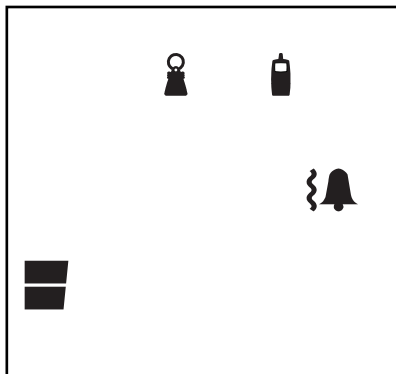

Este menú aparecerá SOLO si la función está disponible en su unidad. Le permite elegir entre las siguientes opciones de notificación:


- solo alarma.
- solo vibración.
- alarma y vibración.

Si se selecciona, la vibración funcionará en las siguientes funciones de alarma: 1) cuando las unidades están fuera de cobertura (si la función "fuera de cobertura" está activada), 2) cuando se alcanza la temperatura mínima o máxima (si esta función está activada), 3) cuando no hay movimiento durante 20 segundos (si la función de movimiento está activada)

NOTA : El modo vibración no trabajará cuando las baterías estén bajas o cuando la unidad receptora de los padres esté en el cargador.

- Pulse MENU y elija la opción deseada. El icono ondas es para el modo vibración y el icono campana es para el modo alarma.
- Seleccione la opción deseada utilizando las flechas. Pulse SELECT.
- Pulse MENU para ver la siguiente opción o EXIT si quiere salir del menú de programación.

Paso 10 CONTROL DE TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN DEL BEBÉ

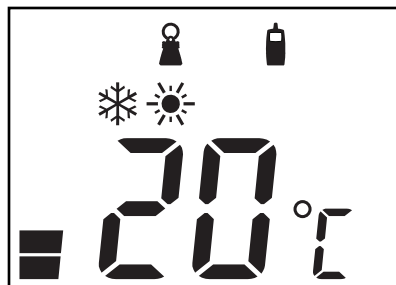

Su monitor Angelcare® puede también monitorizar la temperatura de la habitación del bebé y avisarle cuando la temperatura sea muy alta o muy baja. Se oírán un triple BIP cuando la temperatura alcance los niveles seleccionados.

- Pulse MENU, los iconos de copo de nieve y sol aparecerán en la pantalla con la palabra OFF.
- Seleccione ON u OFF utilizando las flechas.
- Pulse SELECT
- Si selecciona tener el control de temperatura de la habitación activado, pulse MENU. El icono de copo de nieve aparecerá con la temperatura. Seleccione con las flechas la temperatura mínima que desee y pulse SELECT.
- APulse MENU. El icono sol aparecerá con la temperatura. Seleccione con las flechas la temperatura máxima que dese y pulse SELECT.
- Pulse EXIT ya que esta es la última función programable disponible

Paso 11 MODO BATERÍA Y ADVERTENCIAS




- El monitor funcionará con pilas durante un fallo de alimentación eléctrica sólo si ambos aparatos tienen pilas insertadas.
- Es posible utilizar el monitor Angelcare® en lugares donde no haya red eléctrica disponible.
- Cuando la luz ROJA de batería baja de la unidad de vigilancia esté parpadeando, cambie las pilas. En la pantalla de la unidad receptora de los padres parpadeará el icono de batería baja y aparecerá el icono de la unidad de vigilancia. También sonará un BEEP cada 15 segundos durante 30 minutos y finalmente la unidad se apagará sola.
- La unidad receptora de los padres debe recargarse cuando el icono esté apagado (no parpadeará) y se oiga una señal sonora. Un BEEP sonará cada 15 segundos hasta que la unidad se apague sola.

Nota: No utilice pilas alcalinas en la unidad receptora de los padres.

Importante : Si la función "fuera de cobertura" está activada (ON) cuando la unidad e vigilancia se apague automáticamente, la señal "fuera de cobertura" se oirá y el icono aparecerá en la unidad receptora de los padres.

Paso 12 FUNCIONES ADICIONALES

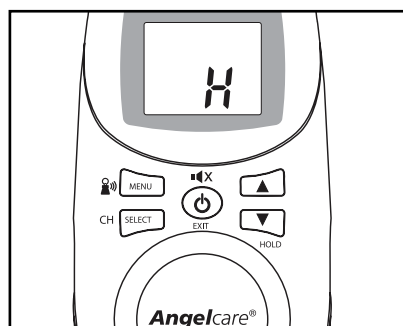

- **SELECCIÓN DE CANAL:** Si la transmisión no es clara, o se escuchan sonidos residuales, debe cambiar el canal. Mantenga pulsado el botón SELECT para cambiar el canal (con las flechas). Luego pulse el botón SELECT otra vez para confirmar.
- **SILENCIO TEMPORAL:** Si desea interrumpir el sonido durante 2 minutos, pulse el botón central EXIT. Para reactivarlo después de transcurridos 2 minutos, pulse EXIT otra vez. Puede también apagar la alarma pulsando el mismo botón (excepto en caso de alarma por nivel bajo de batería).
- **FUNCIÓN EN ESPERA:** Pulse y mantenga por 2 segundos la flecha descendente de volumen. En la pantalla de la unidad receptora de los padres aparecerá el símbolo H parpadeando. Esta función le permite poner el monitor "en espera" cuando necesite sacar al bebé de la cuna por un corto periodo de tiempo. Durante este tiempo, la alarma de movimiento no se desconectará ni se transmitirá sonido. Se escuchará un bip doble cada minuto para recordarle que el monitor está "en espera". Para anular esta función, pulse y mantenga por dos segundos la flecha descendente de volumen. La pantalla volverá a su estado normal.

Nota: Cuando se empieza una alarma de movimiento, apoye en cualquier botón sobre la unidad de los padres para poner el monitor en función en espera. La función en espera no funciona cuando en modo sonido solamente.

- **CONECTAR LA UNIDAD RECEPTORA DE LOS PADRES A LA UNIDAD EMISORA DE VIGILANCIA:** Si pierde la conexión entre ambas unidades, desconecte las dos (OFF). Active (ON) la unidad receptora de los padres y pulse y mantenga el botón MENU. El indicador "fuera de cobertura" parpadeará y escuchará un bip. Active (ON) la unidad emisora de vigilancia y pulse y mantenga el botón superior de la unidad de vigilancia para volver a conectar la unidad. La luz TIC parpadeará. Esto normalmente dura unos pocos segundos y luego escuchará una señal de confirmación. Si se ha tenido éxito, la pantalla de la unidad receptora de los padres primero mostrará el canal de transmisión (C1 a C8) y luego la temperatura de la habitación seguido de los iconos de todas las funciones activadas.

- **INTERCOMUNICACIÓN:** Si desea localizar la unidad de los padres, pulse el botón superior de la unidad de vigilancia.

Paso 13 PRUEBA DE SU MONITOR ANGELCARE®

Nota: Pruebe su monitor Angelcare® ANTES de usarlo por primera vez y periódicamente para asegurarse de que funciona correctamente.

El monitor Angelcare® puede utilizarse fuera de la cuna en cualquier lugar donde duerma el bebé. Pruebe su monitor cuando mueva el sensor de movimiento a un nuevo lugar para asegurarse que la sensibilidad está correctamente ajustada al nuevo colchón. Consulte la sección de ajuste de sensibilidad de movimiento (paso 6).

1. Pruebe el detector de sonido de su monitor. Seleccione la función "sólo sonido" en la unidad receptora de los padres. Haga hablar a alguien o ponga una radio cerca de la unidad de vigilancia. Debería oírlo desde la unidad receptora de los padres. Si no hay sonido, diríjase a la sección "Solución de Problemas".
2. Pruebe el detector de movimiento de su monitor. Seleccione la función "solo movimiento" en la unidad receptora de los padres. Mueva suavemente su mano sobre el colchón. La luz superior verde (con el símbolo del péndulo) se iluminará en la unidad de vigilancia con cada uno de sus movimientos. Retire su mano del colchón. Debido a la falta de movimiento, un sonido "Tic" de prealarma se emitirá transcurridos 15 segundos y 5 segundos más tarde la alarma sonará y la luz verde de la unidad de vigilancia se apagará.

NOTA : Si la alarma no suena, el sensor de movimiento puede estar detectando una continua vibración del suelo, una corriente de aire fuerte o la cuna está siendo movida. Evite el contacto con la cuna cuando el monitor esté en uso. Sitúe la cuna cerca de una pared como soporte sólido y protegida de grandes corrientes de aire. La sensibilidad del sensor puede necesitar ser reducida, consulte la sección de ajuste de sensibilidad de movimiento (paso 6)

3. Para detener la alarma, sitúe su mano suavemente en el colchón y así el sensor empezará a detectar movimiento de nuevo. La luz verde con el icono del péndulo empezará a parpadear de nuevo, ya que se detecta movimiento en el sensor. También puede apagar la unidad de vigilancia y reiniciarla para parar la alarma.
4. Verifique que el modo de batería funciona utilizando ambas unidades sin los adaptadores de electricidad. Si la luz verde de la unidad de vigilancia no se enciende, las baterías necesitan ser cambiadas. Si la unidad receptora de los padres no se enciende y la pantalla no se ilumina, necesitan ser recargadas.

Advertencias

- Este producto NO es un producto médico diseñado para prevenir casos de Síndrome de Muerte Súbita Infantil (SMSI)
- Este producto NO es un sustituto de la supervisión directa de su bebé. Revise la actividad de su bebé a intervalos regulares. La supervisión de bebés prematuros o aquellos considerados bajo riesgo, debe ser efectuada sólo bajo la supervisión de un médico o de un profesional de la salud.
- **NO** sitúe la unidad receptora de los padres cerca de dispositivos inalámbricos o de un horno microondas. Estos dispositivos pueden trastornar la transmisión de la señal de alarma.
- El sensor puede detectar movimiento de varias fuentes tanto del interior como del exterior de la habitación del bebé, provenientes por ejemplo de ventiladores, lavadoras, música alta, etc. Asegúrese de eliminar las fuentes de vibración antes de utilizar su monitor Angelcare®. Evite el contacto con la cuna cuando el monitor esté en uso. Consulte la sección de Ajuste de Sensibilidad de Movimiento (paso 6) o la sección de Solución de Problemas.
- Si el monitor ha estado guardado o ha sido expuesto a temperaturas altas o bajas, la unidad receptora de los padres tardará por lo menos una hora antes de mostrar en pantalla la temperatura correcta.
- Sitúe SIEMPRE ambas unidades en una superficie lisa en posición vertical, lejos del alcance del bebé.
- Asegúrate de enchufar el adaptador al enchufe mas cercano al equipo para facilitar su accesibilidad.
- Riesgo de daño por estrangulamiento o asfixia. Mantenga los cables lejos del alcance del bebé.
- **NO** toque la extremidad del cable del adaptador cuando esté conectado a una toma eléctrica.
- El monitor Angelcare® utiliza ondas públicas para transmitir las señales. La unidad receptora de los padres puede recibir señales o interferencias de otros monitores de vigilancia de la zona. Del mismo modo, su emisión puede ser recepcionada por otros receptores. Para proteger su privacidad, asegúrese de que ambas unidades están en posición OFF cuando no se utilicen.
- Cuando el monitor esté en uso, NO utilice una cuna móvil u otros accesorios de una que puedan producir vibraciones. La alarma no sonará si el monitor todavía capta movimientos.
- **El monitor Angelcare® es totalmente seguro. El sensor de movimiento y su cable son totalmente pasivos. No transmiten ninguna corriente eléctrica ni radian ninguna forma de energía. La unidad de vigilancia emite únicamente una señal de radio muy pobre a través de su antena. Estas señales no presentan ningún peligro.**

- Su monitor puede utilizarse en cualquier cuna o zona de descanso (que no tenga movimiento ni vibración) diseñado para mantener a salvo un bebé.

- Para vigilancia de gemelos:

Necesitará dos monitores Angelcare® AC401 de movimiento y sonido. Asegúrese de que cada monitor está en un canal diferente. Necesitará también dos unidades de recepción de los padres (una para cada cuna).

No utilice el monitor Angelcare® si los dos bebés están en la misma cuna.

- Este producto debe ser reparado por personal cualificado. En su interior no hay componentes reparables por el usuario. Todos los problemas de funcionamiento deben consultarse con su distribuidor.

Mantenimiento de su monitor Angelcare®

- **CONSERVE LAS INSTRUCCIONES:** Guarde el manual de usuario para futuras consultas
- **DAÑOS PROVOCADOS POR AGUA, HUMEDAD Y CALOR:** Mantenga todos los componentes lejos del agua (fregaderos, bañeras, piscinas) y de fuentes de calor (estufas, radiadores).
- **VENTILACIÓN:** Sitúe SIEMPRE ambas unidades en una superficie plana, en posición vertical para que el aire puede circular libremente alrededor. El sensor está fabricado en plástico y no permite circular el aire. Por lo tanto, se podría crear moho bajo el colchón en la zona del sensor. Como prevención, sugerimos girar el colchón regularmente para prevenir el moho.
- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados con su monitor Angelcare®.
- **PROTECCIÓN DEL CABLE:** Evite dañar los cables del sensor y de los adaptadores. Sitúe los cables en una zona donde no se pisen ni estén comprimidos por otros objetos.
- **LIMPIEZA:** Desconecte todos los componentes antes de limpiarlos. NO los sumerja en agua. Utilice paños secos para retirar el polvo del monitor. NO pulverice ningún componente con productos de limpieza o solventes. Limpie el sensor con un paño humedecido ligeramente con un antiséptico o un detergente suave.
- **INFILTRACIÓN DE LÍQUIDOS U OBJETOS:** NO coloque las unidades del intercomunicador donde les puedan caer encima otros objetos y evite que se derrame ningún líquido sobre ninguna de las unidades o de sus aberturas.
- **PERIODOS DE NO UTILIZACIÓN:** Cuando no vaya a utilizar el monitor por un largo periodo, retire las pilas de ambas unidades y desconecte los adaptadores de la red eléctrica.

E
S

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Falsas alarmas.	<ul style="list-style-type: none"> • El bebé ha sido retirado de la cuna y la unidad de vigilancia no se ha apagado • El cable del sensor no se ha conectado correctamente a la unidad de vigilancia. • El sensor no hace contacto pleno con el colchón o el colchón no está totalmente plano sobre una superficie rígida. • El bebé está en un sueño profundo o se ha movido hacia un extremo de la cuna, alejándose del sensor de movimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apague la unidad de vigilancia. • Verifique la conexión entre el sensor de movimiento y la unidad de vigilancia. Desconecte y vuelva a conectar el cable. • Asegúrese de que no hay ropa de cama entre el colchón y el sensor. El sensor debe permanecer en una superficie totalmente rígida y plana. Coloque un listón de madera de 6 mm. De espesor entre el colchón y la base de la cuna. • Asegúrese de que el sensor está posicionada como se describe en la sección "Como utilizar su monitor Angelcare®". Puede tener que ajustarse la sensibilidad. Consulte la sección "Pruebe su monitor Angelcare®".
La alarma no suena.	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad de vigilancia está detectando movimiento debido a que la cuna se está moviendo. • La unidad de vigilancia está detectando movimiento de fuera de la cuna, como dispositivos motorizados, grandes corrientes de aire, etc... • La sensibilidad se a ajustado muy alta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el contacto con la cuna cuando el monitor esté conectado. • Sitúe la cuna cerca de una pared como soporte sólido para evitar que el sensor detecte movimientos ajenos a la cuna. • Puede que necesite reducir la sensibilidad. Consulte la sección "Pruebe su monitor Angelcare®".
El sonido no se transmite.	<ul style="list-style-type: none"> • Las unidades están demasiado lejos y el indicador de "Fuera de Cobertura" está apagado en la unidad receptora de los padres. • Las baterías están bajas o instaladas incorrectamente. • Los adaptadores de electricidad no están correctamente conectados o la toma de corriente no funciona. • Una de las unidades no está encendida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque la unidad receptora de los padres a la unidad de vigilancia • Revise/sustituya las pilas o recambie las de la unidad receptora de los padres. • Revise las conexiones o cambie a otra toma eléctrica. • Asegúrese de que ambas unidades están ON.
El indicador ON de la unidad de vigilancia (segunda luz verde) no se enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Los adaptadores de electricidad no están correctamente conectados o la toma de corriente no funciona. • La unidad de vigilancia no está encendida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Revise las conexiones o cambie a otra toma eléctrica. • Mueva el ala izquierda hacia arriba, en posición ON.
La unidad receptora de los padres está en ON pero la pantalla digital muestra "- " y el icono de la unidad de vigilancia está parpadeando.	<ul style="list-style-type: none"> • La unidad de vigilancia no está encendida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponga la unidad de vigilancia en ON.
Recepción muy débil.	<ul style="list-style-type: none"> • Las unidades están demasiado lejos y el indicador "fuera de cobertura" está apagado. • Una o ambas unidades están muy cerca de una gran masa de metal • Una o ambas unidades no están en posición vertical. • La conexión entre ambas unidades se ha perdido. • Las pilas están bajas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponga el indicador de "fuera de cobertura" en ON como se muestra en el PASO 7 en la sección "Cómo utilizar su monitor Angelcare®" • Acerque la unidad receptora de los padres a la unidad de vigilancia • Cambie la posición de una o de ambas unidades. • Mantenga ambas unidades en una superficie plana lejos del alcance del bebé. • Conecte la unidad receptora de los padres a la unidad de vigilancia según se muestra en el PASO 12 de la sección "Cómo utilizar su monitor Angelcare®" • Sustituya las pilas o recargue la unidad receptora de los padres.
Parásitos, distorsión, interferencias (interferencias de otros monitores, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies, etc...).	<ul style="list-style-type: none"> • El canal seleccionado no está libre de interferencias. • La unidad receptora de los padres está situada cerca de dispositivos motorizados, luces fluorescentes, televisión, etc... 	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione un canal diferente como se muestra en el Paso 12 de la sección "Cómo utilizar su monitor Angelcare®". • Girar la unidad receptora de los padres o apártela de la fuente de interferencias
Acoplamiento (ruidos emitidos por la unidad receptora de los padres).	<ul style="list-style-type: none"> • Las unidades están demasiado cerca la una de la otra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Separe las unidades (como mínimo 3 metros). • Baje el volumen de la unidad receptora de los padres.

GARANTÍA LIMITADA

Angelcare® garantiza al propietario inicial de este producto que durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, el intercomunicador Angelcare® no comportará ningún fallo de material ni de fabricación. Si este sistema de monitorización deja de funcionar correctamente dentro del primer año y utilizándose en condiciones normales, Angelcare® le reparará o sustituirá el producto sin cargo. Por favor contacte con su distribuidor.

El producto deberá ir acompañado del ticket de compra o factura, o cualquier otra prueba de que el sistema de monitorización está dentro del periodo de garantía. Angelcare® asumirá el coste de la reparación o sustitución del producto y de devolvérselo.

Esta garantía no cubre el producto si ha sido dañado como resultado de un mantenimiento incorrecto, un accidente, un voltaje incorrecto o cualquier otro mal uso. La garantía también se anula si el usuario repara o modifica el producto en cualquier sentido. Angelcare® no se hace responsable de cualquier incidente o daño resultante al mal uso de este producto. La garantía también excluye cualquier responsabilidad que no sea la indicada anteriormente. No se ofrece ninguna otra garantía.

LOS DERECHOS LEGALES VARIAN DEPENDIENDO DEL PAÍS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITADOR INCIDENTAL O DAÑOS RESULTANTES DEL MAL USO DE ESTE PRODUCTO, POR LO QUE LAS LIMITACIONES INDICADAS PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

NO SE ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LAS CONSECUENCIAS DEL USO DE ESTE PRODUCTO.

IMPORTANTE! Este sistema de monitorización Angelcare® es un producto de uso personal. Por favor, no devuelva este producto a su tienda. Si tiene preguntas o necesita ayuda, por favor llame a su distribuidor antes de devolver el producto.

Este dispositivo cumple la sección 15 de la normativa FCC. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) este dispositivo no causa interferencias nocivas; y (2) este dispositivo aceptará cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar una operación no deseada.

IMPORTANTE: Los cambios o modificaciones efectuadas a este equipamiento y no aprobadas expresamente por la parte responsable pueden anular los derechos del usuario de operar con este aparato.

NOTA: Este equipamiento ha sido probado y confirmado que cumple los límites de dispositivos de Clase B, cumpliendo la Partida 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias notivas a las comunicaciones por radio. De todos modos, no se ofrece ninguna garantía de que no ocurriría ninguna interferencia en la recepción de radio o de televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el equipo. El usuario puede intentar corregir las interferencias con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientando o reubicando la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente eléctrica diferente.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para ayuda.

PRECAUCIÓN:

- Afin de réduire le risque de choc électrique, protéger cet appareil de la pluie ou de l'humidité.
- Con la finalidad de reducir el shock eléctrico, proteja este dispositivo de la lluvia o la humedad.
- Existe peligro de explosión si las pilas están situadas incorrectamente. Las baterías incluidas son 4 AAAA NIMH recargables fabricadas por Sanik Battery Co. Ltd. SN-AA60HJ 1.2 V 600mAh/ GPI International Limited, GN60AAHC, 1.2V 600mAh. Sólo pueden ser reemplazadas por 4 baterías AAA NIMH recargables.

Transmisión:

927 MHz (EEUU y Canadá)

864 MHz (Europa, Asia, África y Oceanía).

La transmisión de datos entre la unidad de recepción de los padres y la unidad de vigilancia se hace en frecuencia 2.4 GHz.



PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE!

Este equipamiento electrónico contiene material reutilizable y no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor llévelo a un punto de recogida para equipamiento eléctrico y electrónico (pregunte a sus autoridades locales para más información).